

非人灵长类细胞分选

使用EasySep™更高效地分离细胞

非人灵长类细胞分选从未如此地快捷、简单。使用EasySep™ - 强大的免疫磁珠细胞分选平台, 仅需20分钟即可分离出非人灵长类细胞。分离出的细胞纯度高、未经标记, 且可立即用于下游应用。

用于非人灵长类细胞分选的EasySep™试剂盒

细胞类型	产品号 #
T细胞	19581*
CD4 ⁺ T细胞	19582*
CD8 ⁺ T细胞	19583*

*这些试剂盒已经验证, 可用于恒河猴和食蟹猴的PBMCs。

定制细胞分选试剂盒

您是否需要分离其他非人灵长类细胞类型?

使用我们的定制细胞分选试剂盒, 从您的样本中获得非人灵长类细胞。

- EasySep™非人灵长类定制正选试剂盒 (产品号 #18809)
- EasySep™非人灵长类定制富集试剂盒 (产品号 #19809)

为何使用EasySep™来分离非人灵长类细胞?

快速而简单。 仅需20分钟即可从外周血单个核细胞 (PBMCs) 中分离出免疫细胞。

无柱系统。 无需分离柱或清洗细胞, 通过简单倾倒温和分离细胞。

高纯度。 获得的高纯度细胞可立即用于下游功能性研究。

欲了解详情, 请访问www.EasySep.com。

选择最适合您的细胞分选平台



EasySep™
手动细胞分选



RoboSep™-S和RoboSep™-16
全自动细胞分选


工作原理

常规的EasySep™非人灵长类细胞分选操作流程（负选）



*每个试剂盒所需的实际时间取决于使用的磁极和分选流程。

高纯度的细胞

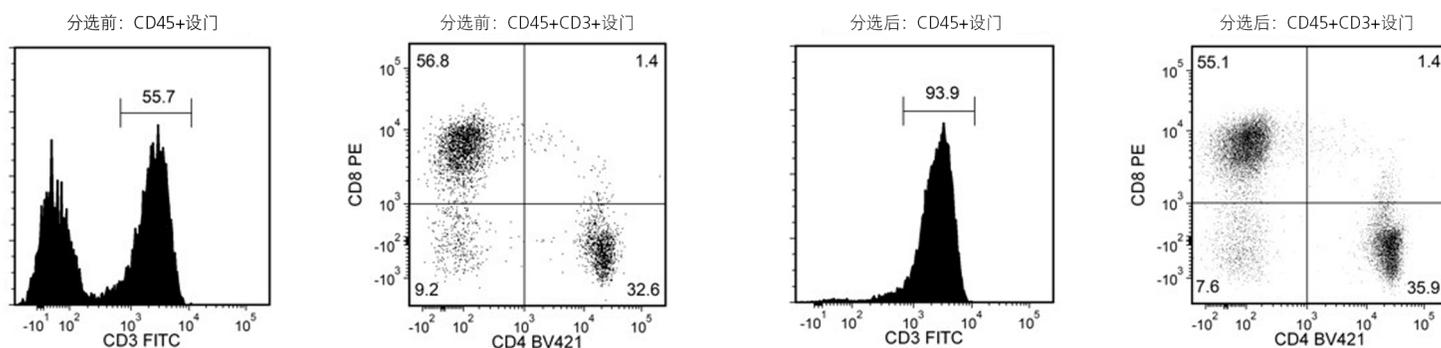

常规的EasySep™非人灵长类T细胞分选流程

以上示例中，起始样本为恒河猴PBMCs，分选前和分选后T细胞含量（以CD45⁺设门）分别为55.7%和93.9%，且CD4⁺和CD8⁺细胞比例保持不变。

欲了解EasySep™细胞分选试剂盒产品的全部列表，请访问www.stemcell.com。

版权所有© STEMCELL Technologies Inc. 2019。保留一切权利，包括图形和图像。STEMCELL Technologies和其设计及徽标，以及Scientists Helping Scientists、EasySep和RoboSep均是STEMCELL Technologies Canada Inc.的注册商标。其他注册商标为各自持有人的产权。STEMCELL尽力确保STEMCELL及其供应商提供的信息正确无误，对此类信息的准确性或完整性不作任何保证或声明。

STEMCELL TECHNOLOGIES INC. 的质量管理体系已经过ISO 13485医疗器械标准认证。产品仅供研究使用。除非另行说明，不可用于人或动物的诊断或治疗。



微信ID: STEMCELLTech



STEMCELL Technologies China Co. Ltd.

电话: 400 885 9050 E-MAIL: INFO.CN@STEMCELL.COM 网站: WWW.STEMCELL.COM

文档号 #29943CN 版本 3.1.0 2019年11月